

APESIN multi

QUICK & EASY


Środek w pianie do dezynfekcji powierzchni

■ **Wszelchstronny**
■ **Bezpieczny**
■ **Wysoce efektywny**

Profil produktu

- Wielofunkcyjny środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania przeciwko bakteriom, drożdżom, wirusom (ograniczone spektrum) i grzybom w obszarach medycznych, instytucjonalnych i publicznych.
- APESIN multi Quick & Easy zapewnia efektywną dezynfekcję i czyszczenie w jednym kroku.
- Wysoce skoncentrowana formuła minimalizuje koszty transportu i wpływa na zmniejszenie potrzebnej powierzchni magazynowej.
- Przenośny system dozujący Quick & Easy oferuje dokładne i bezpieczne dozowanie.
- Nie zawiera barwników i substancji perfumujących.
- Dzięki rezygnacji z takich składników, jak aldehydy, fenole, alkohol i chlor, zapach produktu nie jest uciążliwy.
- Brak aerozolu poprzez innowacyjne rozwiązanie, jakim jest dozowanie w postaci pianki. Dzięki temu produkt doskonale nadaje się do stosowania na dużych obszarach.
- Produkt w roztworze roboczym jest nieklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem CLP, oferując tym samym maksymalne bezpieczeństwo użytkownika.
- Tolerancja na skórze została przetestowana dermatologicznie.

Miejsce aplikacji

- APESIN multi Quick & Easy nadaje się do stosowania na twardych powierzchniach.
- Wszelchstronny - może być stosowany na wszystkich powierzchniach wodoodpornych w obszarach instytucjonalnych, np. obiektach publicznych, biurach, siłowniach.
- Nadaje się również do użycia w domach opieki, gabinetach lekarskich i domach spokojnej starości.
- W obszarach sanitarnych, gdzie potrzebne jest rozpuszczanie osadów wapiennych, zalecamy użycie np. SANET power Quick & Easy, który jest wyjątkowo skuteczny i pozostawia przyjemny, cytrynowy zapach po zastosowaniu.
- Wysoce kompatybilny z powszechnie stosowanymi tworzywami sztucznymi, jak np. PMMA/Polymethyl methacrylate Plexiglas 8N, POM/Polyoxymethylene Hostaform typ C 9021, typ 13021.
- Doskonała kompatybilność z powierzchniami galwanizowanymi, takimi jak chrom, stal nierdzewna i mosiądz, jak również na szkle.

Sposób aplikacji

- Używaj oddzielnego spryskiwacza do produktu APESIN. Oznacz spryskiwacz naklejką.
- Nanieś piankę na ścierkę i zwilż całkowicie powierzchnię.
- Zwilż dokładnie ściereczkę produktem APESIN multi Quick & Easy, aby zagwarantować właściwe zwilżenie powierzchni.
- Pozostaw roztwór na powierzchni przynajmniej przez 1 minutę.
- Rekomendujemy opróżnienie kartridża na wodę po skończonym dniu roboczym i ponowne napełnienie świeżą, czystą wodą, dopiero zaraz przed kolejnym użyciem systemu.

Skład

Składniki na 100 gr: 2,45g DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju



Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska

Bezpieczeństwo: Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Szczegółowe informacje patrz karta techniczna. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Wrażliwy na działanie mrozu.

Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.



Stosowanie i dozowanie




Używaj oddzielnego spryskiwacza do APESIN multi Quick & Easy.



Dozować w zależności od zastosowania. Przestrzegać poniższych instrukcji.



Opróżnij kartridż na wodę po zakończeniu dnia roboczego.

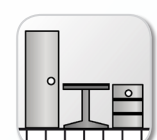

Dezynfekcja i mycie powierzchni: Nanieś piankę na ścierkę i całkowicie zwilż powierzchnię.



Dezynfekcja specjalna: nadaje się do obszarów o szczególnych wymogach higienicznych.



Dezynfekcja sanitariatów: Nanieś piankę na ścierkę i całkowicie zwilż powierzchnię.



Mycie sanitariatów: Aby zwiększyć siłę usuwania kamienia, zastosuj przed dezynfekcją SANET daily Quick & Easy.


Stały roztwór roboczy

Dostępne opakowania

Kod produktu: 714319 6 x 325 ml

Zaufany partner:

Wartość pH

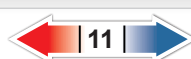

APESIN multi

**QUICK
& EASY**


Środek w pianie do dezynfekcji powierzchni

Działanie dezynfekujące APESIN multi Quick & Easy

		Czas działania
Działanie bakteriobójcze		
EN 1276	warunki brudne	5 min.
EN 13727	warunki brudne	1 min.
EN 13697 I&I	warunki brudne	5 min.
EN 16615	warunki brudne	1 min
Drożdżobójczy		
EN 1650	warunki brudne	5 min.
EN 13624	warunki brudne	1 min.
EN 13697 I&I	warunki brudne	15 min.
EN 16615	warunki brudne	1 min
Grzybobójczy		
EN 13624	warunki brudne	30 min.
EN 16615	warunki brudne	30 min.
Działanie wirusobójcze		
EN 14476 wobec wirusów otoczkowych (łącznie z HIV, HBV, HCV)	warunki brudne	1 min
EN 14476 ograniczone działanie wirusobójcze	warunki brudne	30 min.
EN 14476 wirus ospy (Vakziniaviren)	warunki brudne	1 min.
En 14476 Adenowirusy	warunki brudne	30 min.
EN 14476 Norowirusy	warunki brudne	5 min.
EN 14476 Rotawirusy	warunki czyste	1 min.

		Czas działania
Wpisany na listę VAH - dezynfekcja powierzchni w obszarach medycznych działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze	z udziałem czynnika mechanicznego w warunkach brudnych	5 min.

System Quick & Easy automatycznie zapewnia prawidłowe rozcieńczenie koncentratu produktu na poziomie minimum 10% (v/v).

